


1



1-Saque la tapa del inhalador y tómelo como se muestra en la figura

2

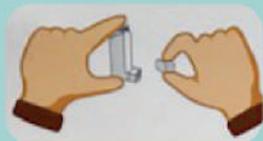

2-Agitelo vigorosamente 10-15 segundos

3



3-Colocar el inhalador en la inhalocámara y adaptar a la cara del niño correctamente la máscara, de manera que cubra nariz y boca.

4

4-Accionar el inhalador y respirar lentamente, de boca abierta, dentro de la inhalocámara contando hasta 10 (aprox. 10 segundos)



5

En caso de tener que repetir la inhalación, retire la inhalocámara de la cara del niño, y el inhalador de la inhalocámara, agite y reinicie el proceso desde el punto 3.

6



Chequeo del inhalador

Observar la fecha de vencimiento. En caso de no usarlo por primera vez o luego de una semana de no usarlo proceda a agitarlo y accionar 1 ó 2 veces antes de la aplicación.



Lavado de Inhalocámara

Desarme y coloque las diferentes piezas en 1 recipiente con agua y jabón por 30-40 minutos. No enjuagar, no secar, no cepillar.

Mantener en un lugar seco y cubierta del polvo ambiental.



PARA MANTENER EL INHALADOR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PROCEDA CON ESTOS SIMPLES PASOS



1-Para evitar obstrucciones proceda semanalmente con estos pasos.



2-Retire el envase metálico sin mojarlo, saque y enjuague la tapa, luego deje correr abundante agua a través del adaptador bucal plástico durante 30 segundos aproximadamente.



3-Deje correr agua también en el sentido contrario durante otros 30 segundos.



4-Quite el exceso de agua agitando y deje secar las piezas según se muestra en esta imagen. Arme nuevamente y accione el inhalador para chequear que funciona correctamente.